






Container

DODAVATEL:





3B instruments
—lékařské nástroje—

Petrovická 857
592 31 Nové Město na Mor.
Tel./Fax.:0616/618 135, 0616/618 317
E-mail: 3B@3b-instruments.cz
Web: www.3b-instruments.cz

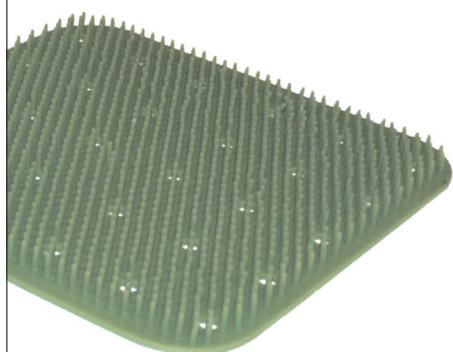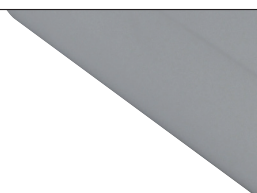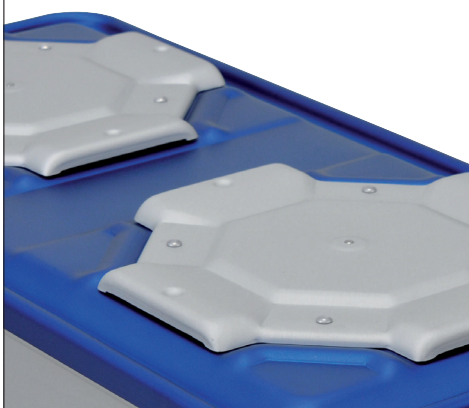

REDA
INSTRUMENTE GMBH

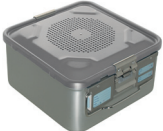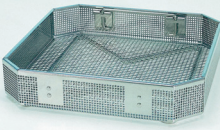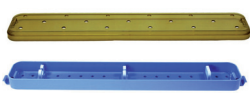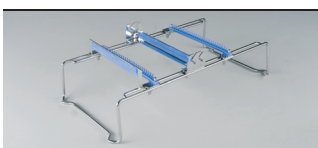

	1/1 Container und Zubehör 1/1 Containers and accessories 1/1 Contenedores y accesorios 1/1 Container e accessori	4-7
	3/4 Container und Zubehör 3/4 Containers and accessories 3/4 Contenedores y accesorios 3/4 Container e accessori	8-11
	1/2 Container und Zubehör 1/2 Containers and accessories 1/2 Contenedores y accesorios 1/2 Container e accessori	12-15
	Flach - Halb - Container und Zubehör Flat half-size-containers and accessories Contenedores planos-medianos y accesorios Piccoli container e accessori	16
	Grossraum Container und Zubehör US Containers and accessories US Contenedores y accesorios US Container e accessori	17
	Mini Container und Zubehör Small containers and accessories Contenedores pequeños y accesorios Piccoli container e accessori	18
	Dental Container und Zubehör Dental Container and accessories Contenedores para Dental y accesorios Dental Container e accessori	19
	Optik und Implantat Container Optic Container Contenedores para óptica y implantates Contentitore Optic	20
	Allgemeines Zubehör Standard accessories Accesorios generales Accessori generali	21-23
	Siebkörbe und Deckel Sheet baskets and covers Cestas y tapas Cestelli e coperchio	24
	Sterilisierkästen Sterilizing cases Cajas para esterilización Scatole per sterilizzazione	25
	Siebkörbe und Kunststoff Container für Endoskope Wire baskets / Container for endoscopes Cestas y Contenedores de plastico para endoscopios Cestelli / Container con alloggi per endoscopi	26
	Lagerungs- und Sterilisierack / Silikon Profile Storage- and sterilization rack / silicone bar Soporto para almacenaje y esterilizacion / barra de silicona Alloggio strumenti / supporti in silicone	27

Container Typen und Dimensionen
Container models and dimensions
Tipos de contenedores y medidas
Modelli dei container e dimensioni

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro



Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio con filtro
 Fondo con filtro

Sicherheitsdeckel
Tapa de seguridad

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro

Safety lid
Coperchio di protezione

Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio con filtro
 Fondo con filtro

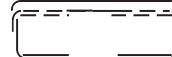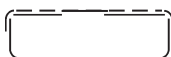

580 x 280 x 100 mm



R 110.10

R 120.10

R 130.10

R 140.10

R 150.10

R 160.10

R 111.10

R 121.10

R 131.10

R 141.10

R 151.10

R 161.10

R 112.10

R 122.10

R 132.10

R 142.10

R 152.10

R 162.10

R 113.10

R 123.10

R 133.10

R 143.10

R 153.10

R 163.10

580 x 280 x 135 mm



R 110.13

R 120.13

R 130.13

R 140.13

R 150.13

R 160.13

R 111.13

R 121.13

R 131.13

R 141.13

R 151.13

R 161.13

R 112.13

R 122.13

R 132.13

R 142.13

R 152.13

R 162.13

R 113.13

R 123.13

R 133.13

R 143.13

R 153.13

R 163.13

580 x 280 x 150 mm



R 110.15

R 120.15

R 130.15

R 140.15

R 150.15

R 160.15

R 111.15

R 121.15

R 131.15

R 141.15

R 151.15

R 161.15

R 112.15

R 122.15

R 132.15

R 142.15

R 152.15

R 162.15

R 113.15

R 123.15

R 133.15

R 143.15

R 153.15

R 163.15

580 x 280 x 200 mm



R 110.20

R 120.20

R 130.20

R 140.20

R 150.20

R 160.20

R 111.20

R 121.20

R 131.20

R 141.20

R 151.20

R 161.20

R 112.20

R 122.20

R 132.20

R 142.20

R 152.20

R 162.20

R 113.20

R 123.20

R 133.20

R 143.20

R 153.20

R 163.20

580 x 280 x 260 mm



R 110.26

R 120.26

R 130.26

R 140.26

R 150.26

R 160.26

R 111.26

R 121.26

R 131.26

R 141.26

R 151.26

R 161.26

R 112.26

R 122.26

R 132.26

R 142.26

R 152.26

R 162.26

R 113.26

R 123.26

R 133.26

R 143.26

R 153.26

R 163.26

Boden ungelocht
Unperforated bottom
Cuerpo sin perforación
Fondo senza filtro



580 x 280 x 100 mm **R 105.10**
 580 x 280 x 135 mm **R 105.13**
 580 x 280 x 150 mm **R 105.15**
 580 x 280 x 200 mm **R 105.20**
 580 x 280 x 260 mm **R 105.26**

Boden gelocht
Perforated bottom
Cuerpo perforado
Fondo con filtro



580 x 280 x 100 mm **R 106.10**
 580 x 280 x 135 mm **R 106.13**
 580 x 280 x 150 mm **R 106.15**
 580 x 280 x 200 mm **R 106.20**
 580 x 280 x 260 mm **R 106.26**

580 x 280 mm



Deckel gelocht
Perforated lid
Tapa perforada
Coperchio con filtro

R 100.01**R 100.02****R 100.03****R 100.04****R 100.05****R 100.06**

580 x 280 mm



Sicherheitsdeckel
Safety lid
Tapa de seguridad
Coperchio di protezione

R 101.01**R 101.02****R 101.03****R 101.04****R 101.05****R 101.06**

Siebkörbe
Wire baskets
Cestas
Cestello



485 x 250 x 30 mm **R 190.03**
 485 x 250 x 50 mm **R 190.05**
 485 x 250 x 70 mm **R 190.07**
 485 x 250 x 100 mm **R 190.10**

Siebkörbe
Wire baskets
Cestas
Cestello



540 x 250 x 30 mm **R 191.03**
 540 x 250 x 50 mm **R 191.05**
 540 x 250 x 70 mm **R 191.07**
 540 x 250 x 100 mm **R 191.10**

Siebboden
Wire base
Cuerpo de cesta
Fondo cestello

545 x 255 x 30 mm **R 193.00**

Silikon - Noppenmatte
Silicon mat
Colchón de silicona
Tappetto in silicone




470 x 230 mm **R 852.40**
 520 x 230 mm **R 852.30**

Spannrahmen für Einschlagtücher
Tension clips for towels
Marcos tensores para paños
Telaio di fissaggio

545 x 255 mm **R 195.00**

Tuch
Drape
Paño
Panno

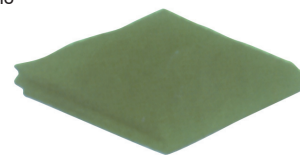


130 x 60 cm **R 095.07**
 140 x 100 cm **R 095.08**



Deckel gelocht
Boden ungelocht
Perforated lid
Unperforated bottom
Tapa perforada
Cuerpo sin perforación
Coperchio con filtro
Fondo senza filtro



580 x 280 x 115 mm

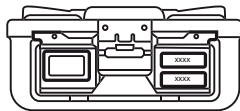

R 110.10 BB

R 120.10 BB



R 130.10 BB

R 140.10 BB


R 150.10 BB

R 160.10 BB

1. Vor der Sterilisation sollten die Valven in eine "Ruheposition" gebracht werden.
2. Während der Sterilisation werden die Valven durch das Vakuum komplett geöffnet und die trockene Luft kann aus dem Container entweichen.

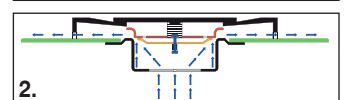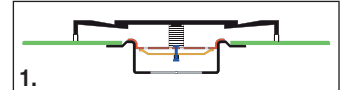

580 x 280 x 140 mm

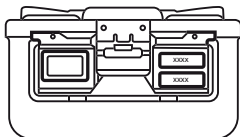

R 110.13 BB

R 120.13 BB


R 130.13 BB

R 140.13 BB


R 150.13 BB

R 160.13 BB

3. Am Ende des Sterilisationszykluses sind die Valven seitenverkehrt durch das Vakuum geöffnet und der Sterilisationszyklus ist beendet.
4. Am Ende des Sterilisationszykluses gleicht der Sterilisator den Luftdruck aus und die Valven des Barrier Containers sind dann geschlossen.

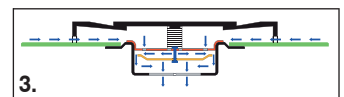

580 x 280 x 155 mm

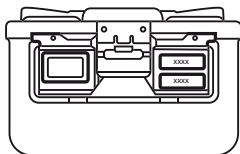

R 110.15 BB

R 120.15 BB


R 130.15 BB

R 140.15 BB


R 150.15 BB

R 160.15 BB

5. Nach der Sterilisation befinden sich die Valven wieder in der "Ruheposition".

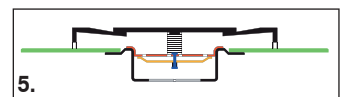

580 x 280 x 205 mm

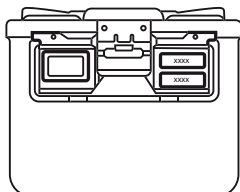

R 110.20 BB

R 120.20 BB

R 130.20 BB


R 140.20 BB

R 150.20 BB

R 160.20 BB

1. Before sterilization, the valves are in the relaxed position.
2. During sterilization, the vacuum completely opens the valves and the dry air is released from the container.
3. At the end of the sterilization cycle, the vacuum completely opens the valves in the opposite direction.
4. At the end of the sterilization cycle, when the pressure level is equalized, the valves are closed.
5. After sterilization, the valves are in the relaxed position.

580 x 280 x 265 mm

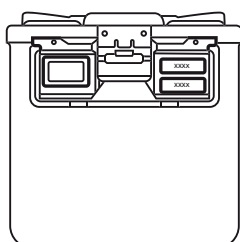

R 110.26 BB

R 120.26 BB

R 130.26 BB




R 140.26 BB

R 150.26 BB

R 160.26 BB



Deckel gelocht
Boden gelocht
Perforated lid
Perforated bottom
Tapa perforada
Cuerpo perforado
Coperchio con filtro
Fondo con filtro

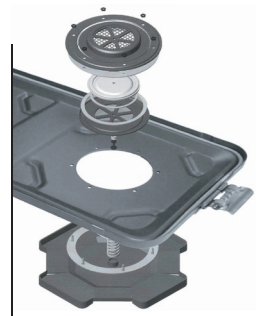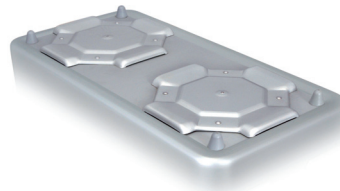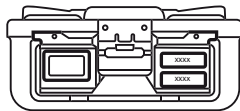**580 x 280 x 135 mm****R 111.10 BB****R 121.10 BB****R 131.10 BB****R 141.10 BB****R 151.10 BB****R 161.10 BB**











1. Antes de iniciar la esterilización, las válvulas están en posición de reposo.

2. Durante la esterilización debido al efecto del vacío, las válvulas se abren completamente y el aire seco escapa del contenedor.

3. Al acabarse el ciclo de la esterilización, las válvulas se abren en el camino contrario debido al vacío y el ciclo de la esterilización se completa.


4. Al terminarse el ciclo de la esterilización, el esterilizador compensa el nivel de la presión y las válvulas del contenedor modelo Barrier se cierran.

5. Terminada la esterilización las válvulas están nuevamente en posición de reposo.

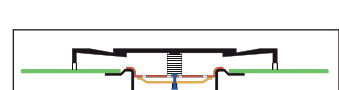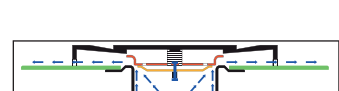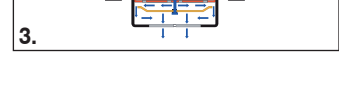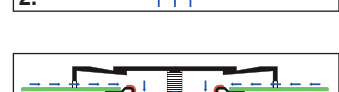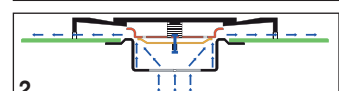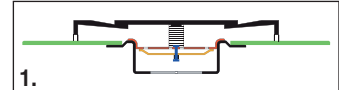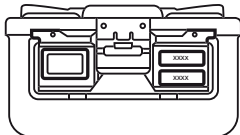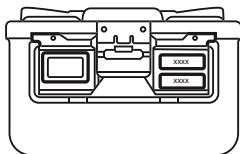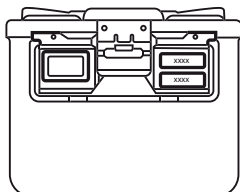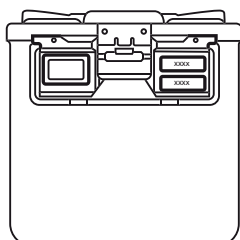**580 x 280 x 160 mm****R 111.13 BB****R 121.13 BB****R 131.13 BB****R 141.13 BB****R 151.13 BB****R 161.13 BB****580 x 280 x 175 mm****R 111.15 BB****R 121.15 BB****R 131.15 BB****R 141.15 BB****R 151.15 BB****R 161.15 BB****580 x 280 x 235 mm****R 111.20 BB****R 121.20 BB****R 131.20 BB****R 141.20 BB****R 151.20 BB****R 161.20 BB****580 x 280 x 295 mm****R 111.26 BB****R 121.26 BB****R 131.26 BB****R 141.26 BB****R 151.26 BB****R 161.26 BB**

Container Typen und Dimensionen
Container models and dimensions
Tipos de contenedores y medidas
Modelli dei container e dimensioni

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro

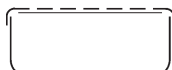

Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio con filtro
 Fondo con filtro



Sicherheitsdeckel
Tapa de seguridad

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro



Safety lid
Coperchio di protezione

Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio con filtro
 Fondo con filtro



465 x 280 x 100 mm



R 210.10

R 220.10

R 230.10

R 240.10

R 250.10

R 260.10

R 211.10

R 221.10

R 231.10

R 241.10

R 251.10

R 261.10

R 212.10

R 222.10

R 232.10

R 242.10

R 252.10

R 262.10

R 213.10

R 223.10

R 233.10

R 243.10

R 253.10

R 263.10

465 x 280 x 135 mm



R 210.13

R 220.13

R 230.13

R 240.13

R 250.13

R 260.13

R 211.13

R 221.13

R 231.13

R 241.13

R 251.13

R 261.13

R 212.13

R 222.13

R 232.13

R 242.13

R 252.13

R 262.13

R 213.13

R 223.13

R 233.13

R 243.13

R 253.13

R 263.13

465 x 280 x 150 mm



R 210.15

R 220.15

R 230.15

R 240.15

R 250.15

R 260.15

R 211.15

R 221.15

R 231.15

R 241.15

R 251.15

R 261.15

R 212.15

R 222.15

R 232.15

R 242.15

R 252.15

R 262.15

R 213.15

R 223.15

R 233.15

R 243.15

R 253.15

R 263.15

Boden ungelocht
Unperforated bottom
Cuerpo sin perforación
Fondo senza filtro



465 x 280 x 100 mm **R 205.10**
465 x 280 x 135 mm **R 205.13**
465 x 280 x 150 mm **R 205.15**

Boden gelocht
Perforated bottom
Cuerpo perforado
Fondo con filtro



465 x 280 x 100 mm **R 206.10**
465 x 280 x 135 mm **R 206.13**
465 x 280 x 150 mm **R 206.15**

465 x 280 mm



Deckel gelocht
Perforated lid
Tapa perforada
Coperchio con filtro

R 200.01

R 200.02

R 200.03

R 200.04

R 200.05

R 200.06

465 x 280 mm



Sicherheitsdeckel
Safety lid
Tapa de seguridad
Coperchio di protezione

R 201.01

R 201.02

R 201.03

R 201.04

R 201.05

R 201.06

Siebkörbe
Wire baskets
Cestas
Cestello




405 x 250 x 30 mm **R 290.03**
405 x 250 x 50 mm **R 290.05**
405 x 250 x 70 mm **R 290.07**
405 x 250 x 100 mm **R 290.10**

Siebboden
Wire base
Cuerpo de cesta
Fondo di cestello



405 x 250 x 30 mm **R 293.03**

Silikon - Noppenmatte
Silicon mat
Colchón de silicona
Tappeto in silicone

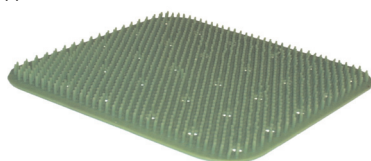


380 x 230 mm **R 852.10**
440 x 230 mm **R 852.20**

Spannrahmen für Einschlagtücher
Tension clips for towels
Marcos tensores para paños
Telaio di fissaggio




405 x 255 mm **R 295.00**



Tuch
Drape
Paño
Panno

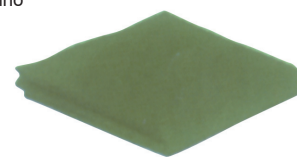


140 x 100 cm **R 095.08**

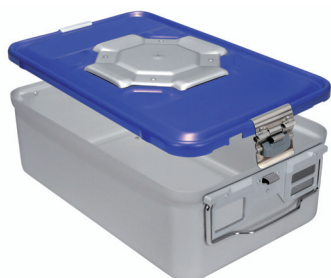

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Perforated lid
Unperforated bottom
Tapa perforada
Cuerpo sin perforación
Coperchio con filtro
Fondo senza filtro

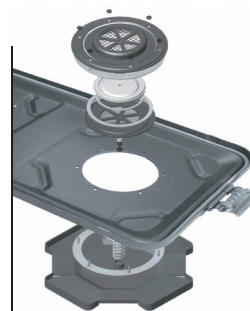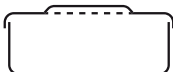

465 x 280 x 115 mm

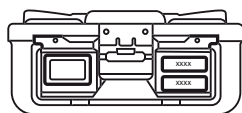

R 210.10 BB

R 220.10 BB



R 230.10 BB

R 240.10 BB


R 250.10 BB

R 260.10 BB


1. Vor der Sterilisation sollten die Valven in eine "Ruheposition" gebracht werden.
2. Während der Sterilisation werden die Valven durch das Vakuum komplett geöffnet und die trockene Luft kann aus dem Container entweichen.

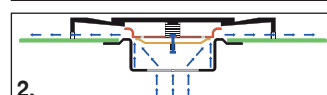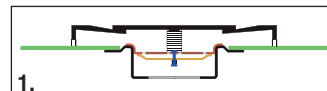


3. Am Ende des Sterilisationszykluses sind die Valven seitenverkehrt durch das Vakuum geöffnet und der Sterilisationszyklus ist beendet.

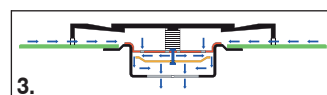


4. Am Ende des Sterilisationszykluses gleicht der Sterilisator den Luftdruck aus und die Valven des Barrier Containers sind dann geschlossen.

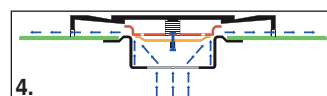

5. Nach der Sterilisation befinden sich die Valven wieder in der "Ruheposition".

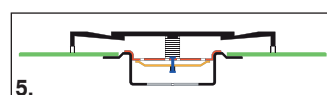

465 x 280 x 140 mm

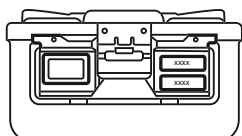

R 210.13 BB

R 220.13 BB


R 230.13 BB

R 240.13 BB

R 250.13 BB

R 260.13 BB

465 x 280 x 155 mm

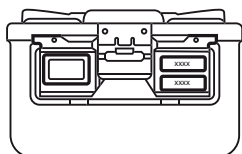

R 210.15 BB

R 220.15 BB

R 230.15 BB

R 240.15 BB



R 250.15 BB

R 260.15 BB


1. Before sterilization, the valves are in the relaxed position.
2. During sterilization, the vacuum completely opens the valves and the dry air is released from the container.
3. At the end of the sterilization cycle, the vacuum completely opens the valves in the opposite direction.
4. At the end of the sterilization cycle, when the pressure level is equalized, the valves are closed.
5. After sterilization, the valves are in the relaxed position.



Deckel gelocht
Boden gelocht
Perforated lid
Perforated bottom
Tapa perforada
Cuerpo perforado
Coperchio con filtro
Fondo con filtro

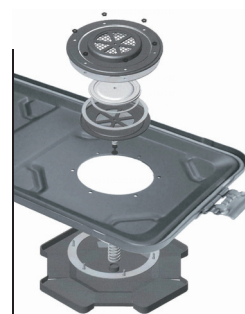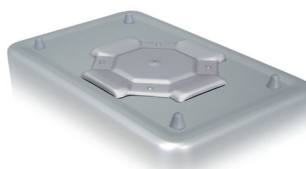

465 x 280 x 135 mm

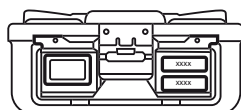

R 211.10 BB

R 221.10 BB

R 231.10 BB

R 241.10 BB

R 251.10 BB

R 261.10 BB






1. Antes de iniciar la esterilización, las válvulas están en posición de reposo.

2. Durante la esterilización debido al efecto del vacío, las válvulas se abren completamente y el aire seco escapa del contenedor.


3. Al acabarse el ciclo de la esterilización, las válvulas se abren en el camino contrario debido al vacío y el ciclo de la esterilización se completa.

4. Al terminarse el ciclo de la esterilización, el esterilizador compensa el nivel de la presión y las válvulas del contenedor modelo Barrier se cierran.

5. Terminada la esterilización las válvulas están nuevamente en posición de reposo.

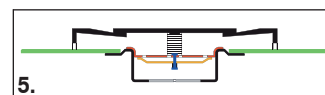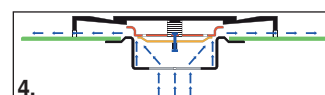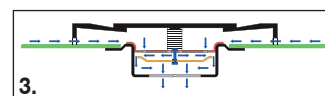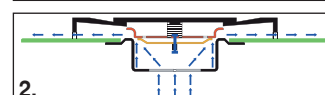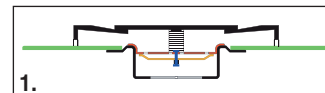

465 x 280 x 160 mm

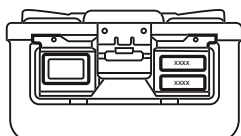

R 211.13 BB

R 221.13 BB


R 231.13 BB

R 241.13 BB

R 251.13 BB

R 261.13 BB

465 x 280 x 175 mm

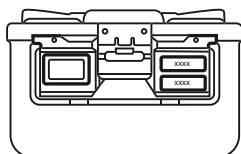

R 211.15 BB

R 221.15 BB

R 231.15 BB

R 241.15 BB

R 251.15 BB

R 261.15 BB

Container Typen und Dimensionen
Container models and dimensions
Tipos de contenedores y medidas
Modelli dei container e dimensioni

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro

Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio con filtro
 Fondo con filtro

Sicherheitsdeckel
 Tapa de seguridad

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro

Safety lid
 Coperchio di protezione

Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio con filtro
 Fondo con filtro



285 x 280 x 100 mm



R 310.10

R 320.10

R 330.10

R 340.10

R 350.10

R 360.10

R 311.10

R 321.10

R 331.10

R 341.10

R 351.10

R 361.10

R 312.10

R 322.10

R 332.10

R 342.10

R 352.10

R 362.10

R 313.10

R 323.10

R 333.10

R 343.10

R 353.10

R 363.10

285 x 280 x 135 mm



R 310.13

R 320.13

R 330.13

R 340.13

R 350.13

R 360.13

R 311.13

R 321.13

R 331.13

R 341.13

R 351.13

R 361.13

R 312.13

R 322.13

R 332.13

R 342.13

R 352.13

R 362.13

R 313.13

R 323.13

R 333.13

R 343.13

R 353.13

R 363.13

285 x 280 x 150 mm



R 310.15

R 320.15

R 330.15

R 340.15

R 350.15

R 360.15

R 311.15

R 321.15

R 331.15

R 341.15

R 351.15

R 361.15

R 312.15

R 322.15

R 332.15

R 342.15

R 352.15

R 362.15

R 313.15

R 323.15

R 333.15

R 343.15

R 353.15

R 363.15

285 x 280 x 200 mm



R 310.20

R 320.20

R 330.20

R 340.20

R 350.20

R 360.20

R 311.20

R 321.20

R 331.20

R 341.20

R 351.20

R 361.20

R 312.20

R 322.20

R 332.20

R 342.20

R 352.20

R 362.20

R 313.20

R 323.20

R 333.20

R 343.20

R 353.20

R 363.20

285 x 280 x 260 mm



R 310.26

R 320.26

R 330.26

R 340.26

R 350.26

R 360.26

R 311.26

R 321.26

R 331.26

R 341.26

R 351.26

R 361.26

R 312.26

R 322.26

R 332.26

R 342.26

R 352.26

R 362.26

R 313.26

R 323.26

R 333.26

R 343.26

R 353.26

R 363.26

Boden ungelocht
Unperforated bottom
Cuerpo sin perforación
Fondo senza filtro



280 x 280 x 100 mm **R 305.10**
280 x 280 x 135 mm **R 305.13**
280 x 280 x 150 mm **R 305.15**
280 x 280 x 200 mm **R 305.20**
280 x 280 x 260 mm **R 305.26**

Boden gelocht
Perforated bottom
Cuerpo perforado
Fondo con filtro



280 x 280 x 100 mm **R 306.10**
280 x 280 x 135 mm **R 306.13**
280 x 280 x 150 mm **R 306.15**
280 x 280 x 200 mm **R 306.20**
280 x 280 x 260 mm **R 306.26**

285 x 280 mm



Deckel gelocht
Perforated lid
Tapa perforada
Coperchio con filtro

R 300.01
R 300.02
R 300.03
R 300.04
R 300.05
R 300.06

285 x 280 mm



Sicherheitsdeckel
Safety lid
Tapa de seguridad
Coperchio di protezione

R 301.01
R 301.02
R 301.03
R 301.04
R 301.05
R 301.06

Siebkörbe
Wire baskets
Cestas
Cestello




255 x 250 x 30 mm **R 390.03**
255 x 250 x 50 mm **R 390.05**
255 x 250 x 70 mm **R 390.07**
255 x 250 x 100 mm **R 390.10**

Siebboden
Wire base
Cuerpo de cesta
Fondo di cestello

255 x 255 x 30 mm **R 393.00**


Silikon - Noppenmatte
Silicon mat
Colchón de silicona
Tappetto in silicone

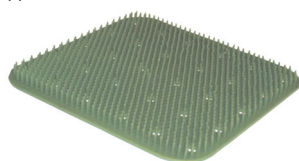250 x 235 mm **R 851.00**

Spannrahmen für Einschlagtücher
Tension clips for towels
Marcos tensores para paños
Telaio di fissaggio

255 x 255 mm **R 395.00**


Tuch
Drape
Paño
Panno

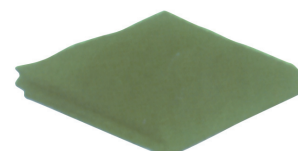


90 x 60 cm **R 095.04**
90 x 80 cm **R 095.05**
130 x 45 cm **R 095.06**
130 x 60 cm **R 095.07**



Deckel gelocht
Boden ungelocht
Perforated lid
Unperforated bottom
Tapa perforada
Cuerpo sin perforación
Coperchio con filtro
Fondo senza filtro

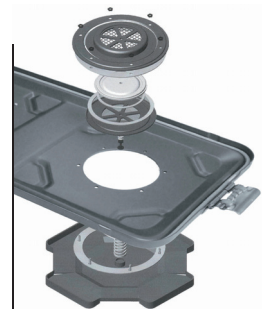

285 x 280 x 115 mm

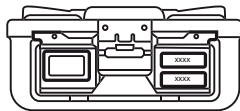

R 310.10 BB

R 320.10 BB



R 330.10 BB

R 340.10 BB


R 350.10 BB

R 360.10 BB

1. Vor der Sterilisation sollten die Valven in eine "Ruheposition" gebracht werden.
2. Während der Sterilisation werden die Valven durch das Vakuum komplett geöffnet und die trockene Luft kann aus dem Container entweichen.

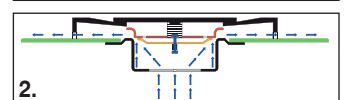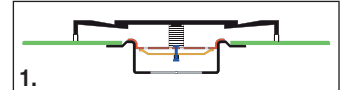

285 x 280 x 140 mm

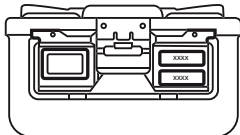

R 310.13 BB

R 320.13 BB


R 330.13 BB

R 340.13 BB


R 350.13 BB

R 360.13 BB

3. Am Ende des Sterilisationszykluses sind die Valven seitenverkehrt durch das Vakuum geöffnet und der Sterilisationszyklus ist beendet.
4. Am Ende des Sterilisationszykluses gleicht der Sterilisator den Luftdruck aus und die Valven des Barrier Containers sind dann geschlossen.

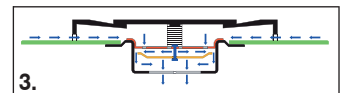

285 x 280 x 155 mm

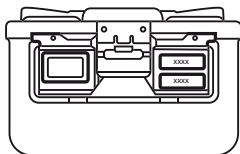

R 310.15 BB

R 320.15 BB


R 330.15 BB

R 340.15 BB


R 350.15 BB

R 360.15 BB

5. Nach der Sterilisation befinden sich die Valven wieder in der "Ruheposition".

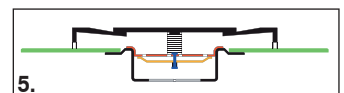

285 x 280 x 205 mm

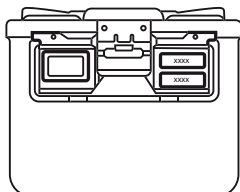

R 310.20 BB

R 320.20 BB

R 330.20 BB


R 340.20 BB

R 350.20 BB

R 360.20 BB

1. Before sterilization, the valves are in the relaxed position.
2. During sterilization, the vacuum completely opens the valves and the dry air is released from the container.
3. At the end of the sterilization cycle, the vacuum completely opens the valves in the opposite direction.
4. At the end of the sterilization cycle, when the pressure level is equalized, the valves are closed.
5. After sterilization, the valves are in the relaxed position.

285 x 280 x 265 mm

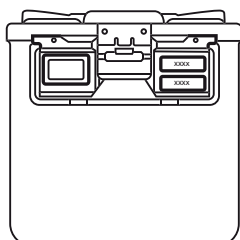

R 310.26 BB

R 320.26 BB

R 330.26 BB



R 340.26 BB

R 350.26 BB


R 360.26 BB



Deckel gelocht
Boden gelocht
Perforated lid
Perforated bottom
Tapa perforada
Cuerpo perforado
Coperchio con filtro
Fondo con filtro

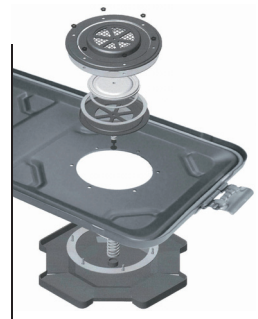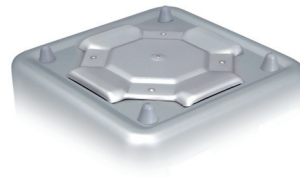

285 x 280 x 135 mm

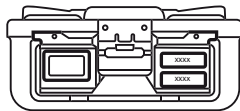

R 311.10 BB

R 321.10 BB



R 331.10 BB

R 341.10 BB


R 351.10 BB

R 361.10 BB


1. Antes de iniciar la esterilización, las válvulas están en posición de reposo.
2. Durante la esterilización debido al efecto del vacío, las válvulas se abren completamente y el aire seco escapa del contenedor.

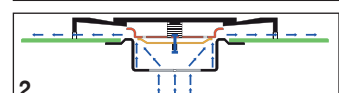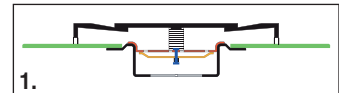


3. Al acabarse el ciclo de la esterilización, las válvulas se abren en el camino contrario debido al vacío y el ciclo de la esterilización se completa.

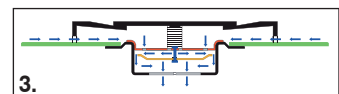


4. Al terminarse el ciclo de la esterilización, el esterilizador compensa el nivel de la presión y las válvulas del contenedor modelo Barrier se cierran.

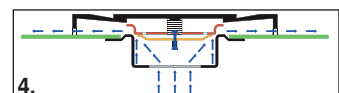

5. Terminada la esterilización las válvulas están nuevamente en posición de reposo.

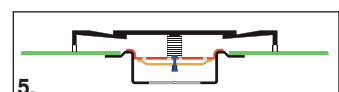

285 x 280 x 160 mm

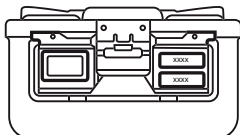

R 311.13 BB

R 321.13 BB


R 331.13 BB

R 341.13 BB

R 351.13 BB

R 361.13 BB

285 x 280 x 175 mm

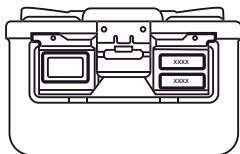

R 311.15 BB

R 321.15 BB


R 331.15 BB

R 341.15 BB

R 351.15 BB

R 361.15 BB

285 x 280 x 235 mm

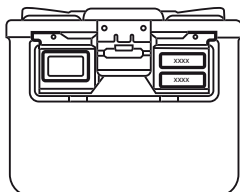

R 311.20 BB

R 321.20 BB


R 331.20 BB

R 341.20 BB

R 351.20 BB

R 361.20 BB

285 x 280 x 295 mm

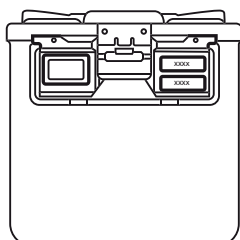

R 311.26 BB

R 321.26 BB

R 331.26 BB

R 341.26 BB

R 351.26 BB

R 361.26 BB

Container Typen und Dimensionen
Container models and dimensions
Tipos de contenedores y medidas
Modelli dei container e dimensioni

	Deckel gelocht Boden ungelocht Perforated lid Unperforated bottom Tapa perforada Cuerpo sin perforación Coperchio con filtro Fondo senza filtro	Deckel gelocht Boden gelocht Perforated lid Perforated bottom Tapa perforada Cuerpo perforado Coperchio con filtro Fondo con filtro	Boden ungelocht Unperforated bottom Cuerpo sin perforación Fondo senza filtro	Boden gelocht Perforated bottom Cuerpo perforado Fondo con filtro
285 x 280 x 55 mm 	R 310.05 R 320.05 R 330.05 R 340.05 R 350.05 R 360.05		R 305.05 	
285 x 280 x 85 mm 	R 310.08 R 320.08 R 330.08 R 340.08 R 350.08 R 360.08	R 311.08 R 321.08 R 331.08 R 341.08 R 351.08 R 361.08	R 305.08 	R 306.08
285 x 280 mm 	R 304.01 R 304.02 R 304.03 R 304.04 R 304.05 R 304.06	Deckel gelocht Perforated lid Tapa perforada Coperchio con filtro	Tuch Drape Paño Panno 90 x 60 cm R 095.04 90 x 80 cm R 095.05	
Siebkörbe Wire baskets Cestas Cestello 255 x 250 x 30 mm R 390.03 255 x 250 x 50 mm R 390.05 	Siebboden Wire base Cuerpo de cesta Fondo di cestello 255 x 255 x 30 mm R 393.00 			
Silikon - Noppenmatte Silicon mat Colchón de silicona Tappetto in silicone 250 x 235 mm R 851.00 	Spannrahmen für Einschlagtücher Tension clips for towels Marcos tensores para paños Telaio di fissaggio 255 x 255 mm R 395.00 			

Container komplett
Container complete
Contenedores completos
Container completo



590 x 370 x 120 mm
 590 x 370 x 180 mm
 590 x 370 x 120 mm
 590 x 370 x 180 mm
 590 x 370 x 120 mm
 590 x 370 x 180 mm
 590 x 370 x 120 mm
 590 x 370 x 180 mm
 590 x 370 x 120 mm
 590 x 370 x 180 mm

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro



R 110.62
R 110.68

R 120.62
R 120.68

R 130.62
R 130.68

R 140.62
R 140.68

R 150.62
R 150.68

R 160.62
R 160.68

Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio con filtro
 Fondo con filtro



R 111.62
R 111.68

R 121.62
R 121.68

R 131.62
R 131.68

R 141.62
R 141.68

R 151.62
R 151.68

R 161.62
R 161.68

590 x 370 mm

Deckel gelocht
 Perforated lid
 Tapa perforada
 Coperchio con filtro



R 100.51

R 100.52

R 100.53

R 100.54

R 100.55

R 100.56

Boden ungelocht
 Unperforated bottom
 Cuerpo sin perforación
 Fondo senza filtro



R 105.62
R 105.68

Boden gelocht
 Perforated bottom
 Cuerpo perforado
 Fondo con filtro



R 106.62
R 106.68

Siebkörbe
 Wire baskets
 Cestas
 Cestello



533 x 337 x 50 mm **R 190.55**


Siebkörbe
 Wire baskets
 Cestas
 Cestello



533 x 337 x 100 mm **R 191.60**

Container Typen und Dimensionen
Container models and dimensions
Tipos de contenedores y medidas
Modelli dei container e dimensioni

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro

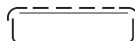

300 x 140 x 40 mm



R 410.04

R 420.04

R 430.04

R 440.04

R 450.04

R 460.04

300 x 140 x 70 mm



R 410.07

R 420.07

R 430.07

R 440.07

R 450.07

R 460.07

300 x 140 x 100 mm



R 410.10

R 420.10

R 430.10

R 440.10

R 450.10

R 460.10

Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio con filtro
 Fondo con filtro

300 x 140 x 40 mm



R 411.04

R 421.04

R 431.04

R 441.04

R 451.04

R 461.04

300 x 140 x 70 mm



R 411.07

R 421.07

R 431.07

R 441.07

R 451.07

R 461.07

300 x 140 mm



Deckel gelocht
 Perforated lid
 Tapa perforada
 Coperchio con filtro

R 400.01

R 400.02

R 400.03

R 400.04

R 400.05

R 400.06

Boden ungelocht
 Unperforated bottom
 Cuerpo sin perforación
 Fondo senza filtro



300 x 140 x 40 mm R 405.04

300 x 140 x 70 mm R 405.07


Boden gelocht
 Perforated bottom
 Cuerpo perforado
 Fondo con filtro



300 x 140 x 40 mm R 406.04

300 x 140 x 70 mm R 406.07

Silikon - Noppenmatte
 Silicon mat
 Colchón de silicona
 Tappetto in silicone

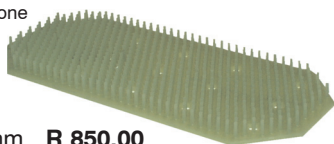


275 x 125 mm R 850.00

Spannrahmen für Einschlagtücher
 Tension clips for towels
 Marcos tensores para paños
 Telaio di fissaggio



270 x 125 mm R 495.00

Tuch
 Drape
 Paño
 Panno

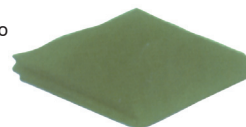


60 x 40 cm R 095.01

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Perforated lid
Unperforated bottom
Tapa perforada
Cuerpo sin perforación
Coperchio con filtro
Fondo senza filtro



310 x 190 x 40 mm **R 510.04**

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Perforated lid
Unperforated bottom
Tapa perforada
Cuerpo sin perforación
Coperchio con filtro
Fondo senza filtro

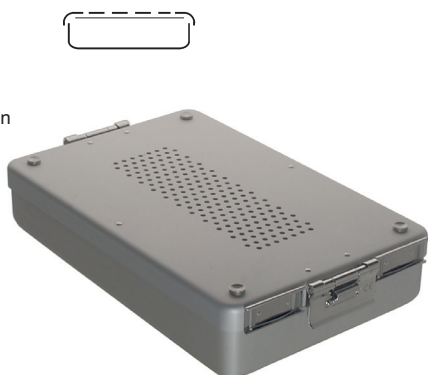

310 x 190 x 65 mm **R 510.06**

Deckel gelocht
Boden ungelocht
Perforated lid
Unperforated bottom
Tapa perforada
Cuerpo sin perforación
Coperchio con filtro
Fondo senza filtro



310 x 190 x 130 mm **R 510.13**

Deckel gelocht
Perforated lid
Tapa perforada
Coperchio con filtro




310 x 190 x 40 mm **R 500.01**

Boden ungelocht
Unperforated bottom
Cuerpo sin perforación
Fondo senza filtro



310 x 190 x 40 mm **R 505.04**
310 x 190 x 65 mm **R 505.06**
310 x 190 x 130 mm **R 505.13**

Silikon - Noppenmatte
Silicon mat
Colchón de silicona
Tappetto in silicone

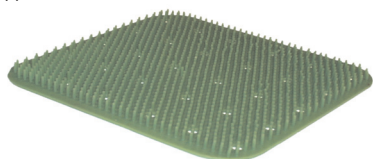


260 x 180 mm **R 850.10**

Spannrahmen für Einschlagtücher
Tension clips for towels
Marcos tensores para paños
Telaio di fissaggio



277 x 175 mm **R 595.00**


Tuch
Drape
Paño
Panno

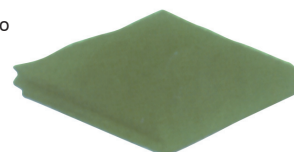


60 x 40 cm **R 095.01**
65 x 65 cm **R 095.02**
85 x 85 cm **R 095.03**

Optik Container ohne Filter
Optic Container without filter
Contenedor para óptica sin filtro
Contentore per ottiche senza filtro

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro

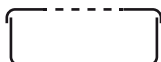

Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación
 Coperchio con filtro
 Fondo senza filtro

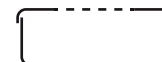

250 x 60 x 50 mm



R 510.50

R 520.50

R 530.50

R 540.50

R 550.50

R 560.50

450 x 70 x 70 mm



R 510.70

R 520.70

R 530.70


R 540.70

R 550.70


R 560.70

Implantat Container ohne Filter
Implantat container without filter
Contenedor para implantates sin filtro
Contentore per implantat senza filtro

Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio forato
 Fondo forato

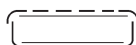

Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado
 Coperchio forato
 Fondo forato

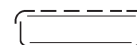

300 x 138 x 65 mm



R 610.06

R 620.06

R 630.06

R 640.06

R 650.06

R 660.06

500 x 155 x 75 mm



R 612.07

R 622.07


R 632.07

R 642.07

R 652.07

R 662.07

**Einmal - Papier -
Sterilfilter**

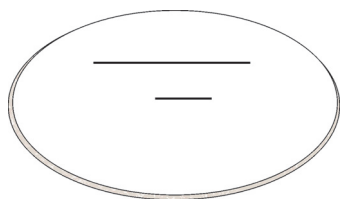


R 800.00

1000 Stück / Unit 1000 pcs.
paquete de 1000 unidades / conf. 1000 pezzi

für Container 1/1, 3/4, 1/2
for containers 1/1, 3/4, 1/2
para contenedores 1/1, 3/4, 1/2
per container 1/1, 3/4, 1/2

**Disposable sterile
paper filter**

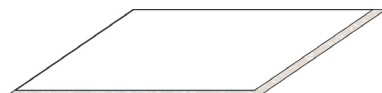

R 804.00

1000 Stück / Unit 1000 pcs.
paquete de 1000 unidades / conf. 1000 pezzi

für Klein Container (MINI)
for small containers (MINI)
para contenedores pequeños (MINI)
per piccoli container (MINI)

**Filtros de papel uso
para un solo**




R 802.00

1000 Stück / Unit 1000 pcs.
paquete de 1000 unidades / conf. 1000 pezzi

für DENTAL Container
for DENTAL containers
Contenedores para DENTAL
per container DENTAL

**Langzeit-Textil-Filter
50 Sterilisationen**

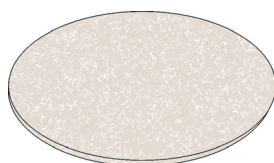

R 800.01

1 Stück / Single / Unidad suelta / Singolo

für Container 1/1, 3/4, 1/2
for containers 1/1, 3/4, 1/2
para contenedores 1/1, 3/4, 1/2
per container 1/1, 3/4, 1/2

**Permanent Textile Filters
50 sterilizations**



R 804.01

1 Stück / Single / Unidad suelta / Singolo

für Klein Container (MINI)
for small containers (MINI)
para contenedores pequeños (MINI)
per piccoli container (MINI)

**Filtro de textil duradero
50 esterilizaciones**




R 802.01

1 Stück / Single / Unidad suelta / Singolo

für DENTAL Container
for DENTAL containers
Contenedores para DENTAL
per container DENTAL

**Filtro riusabile tessile
per 50 sterilizzazione**

**Langzeit-Teflonfilter
1200 Sterilisationen**

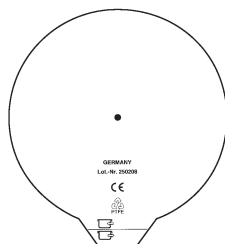


R 800.02

1 Stück / Single / Unidad suelta / Singolo

für Container 1/1, 3/4, 1/2
for containers 1/1, 3/4, 1/2
para contenedores 1/1, 3/4, 1/2
per container 1/1, 3/4, 1/2

**Teflon filter
1200 sterilizations**

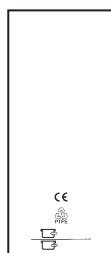


R 800.20

1 Stück / Single / Unidad suelta / Singolo

für Klein Container (MINI)
for small containers (MINI)
para contenedores pequeños (MINI)
per piccoli container (MINI)

**Filtro duradero de Teflon
1200 esterilizaciones**

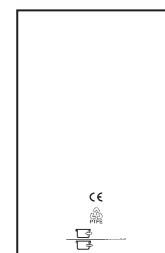

R 800.10


1 Stück / Single / Unidad suelta / Singolo

für DENTAL Container
for DENTAL containers
Contenedores para DENTAL
per container DENTAL

**Filtro PE
per 1200 sterilizzazione**

Indikatoretiketten aus Papier
Paper indicators
Etiquetas indicadores de papel
Targhetta in carta monouso

69 x 38 mm

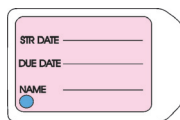**R 810.00**

100 Stück / Unit 100 pcs.
 paquete de 100 unidades / conf. 100 pezzi

für Container 1/1, 3/4, 1/2
 for containers 1/1, 3/4, 1/2
 para contenedores 1/1, 3/4, 1/2
 per container 1/1, 3/4, 1/2

Indikatoretiketten aus Papier
Paper indicators
Etiquetas indicadores de papel
Targhetta in carta monouso

58 x 18 mm


**R 812.00**

100 Stück / Unit 100 pcs.
 paquete de 100 unidades / conf. 100 pezzi

für Klein Container (MINI)
 for small containers (MINI)
 para contenedores pequeños (MINI)
 per piccoli container (MINI)

Kennzeichnungsschilder ohne Gravur
Aluminium indicators without graving
Etiquetas de identificación sin grabación
Targhetta d'alluminio senza incisione

50 x 18 mm

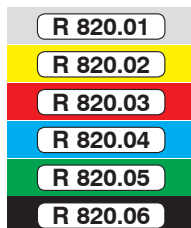


CHIRURGIE	TRANSPLANTATION	GYNÄKOLOGIE
GYNÄKOLOGIE	CHIRURGIE	TRANSPLANTATION
GRUNDSIEB	GRUNDSIEB	GYNÄKOLOGIE
GRUNDSIEB	GRUNDSIEB	GYNÄKOLOGIE

Verschlußplomben aus Kunststoff
Plastic seals
Precintos de plástico
Sigillo in plastica

**R 818.00**

1000 Stück / Unit 1000 pcs.
 paquete de 1000 unidades / conf. 1000 pezzi

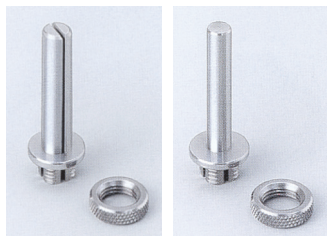**R 830.00**

Trennblechhaltesttift zur Aufnahme von Trennblechen

Fixing bolt for divisions

Piñon para separadores

Perno di fissaggio per separatori



R 830.01

Sortierspieß zur Fixierung von Instrumenten

Fixation shaft for instruments

Piñon para fijar instrumental

Perno di fissaggio per strumenti

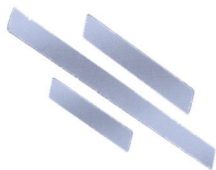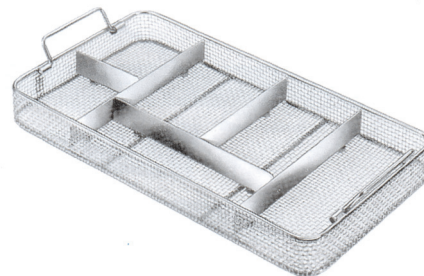
**R 831.05** 50 x 20 mm**R 831.13** 130 x 20 mm**R 831.22** 225 x 20 mm**R 831.46** 460 x 20 mm

Trennbleche

Divisions

Separadores

Divisori per cesti in rete

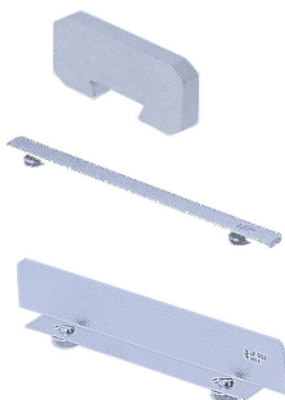**R 840.00**

Gleitschieber

Sliders

Corredor

Cursore

R 841.00

Schiene für Gleitschieber

Rail for sliders

Riel para corredor


Sbarra per cursore

R 842.00 Winkelblech (Anschlagrahmen)

Angle stopper

Separador ángulado

Sbarra angolata

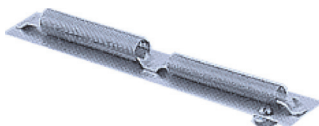
**R 845.00**

Spiralfeder

Spiral spring

Resorte

Molla a spirale

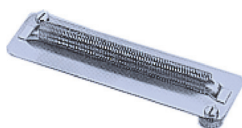
**R 847.00**

Spiralfeder - Haltevorrichtung

Fixation for spiral spring

Fijación para resorte

Molla a spirale per sostegno di supporto

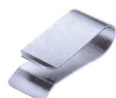**R 849.00**

Fixierklammer


Fixation clips

Clip de fijación

Pinza fissatelo a presa doppia




Siebkörbe rostfreier Stahl
Stainless steel perforated sheet baskets
Cestas de acero inoxidable
Cestelli in lamiera forata inox

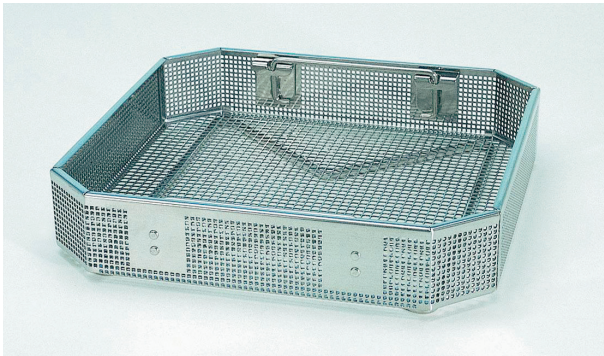

- Siebkörbe rostfreier Stahl
- Stainless steel perforated sheet baskets
- Bandejas de acero inoxidable
- Cestelli in lamiera forata inox

89421-50	mm	210	145	50
89424-41	mm	240	240	41
89424-45	mm	240	240	45
89424-50	mm	240	240	50
89424-70	mm	240	240	70
89424-90	mm	240	240	90
89428-40	mm	280	110	40
89428-70	mm	280	110	70
89430-35	mm	300	240	35
89430-50	mm	300	240	50
89430-70	mm	300	240	70
89440-41	mm	380	240	41
89440-45	mm	380	240	45
89440-50	mm	380	240	50
89440-70	mm	380	240	70
89440-90	mm	380	240	90
89448-41	mm	480	240	41
89448-45	mm	480	240	45
89448-50	mm	480	240	50
89448-70	mm	480	240	70
89448-90	mm	480	240	90
89454-41	mm	540	240	41
89454-45	mm	540	240	45
89454-50	mm	540	240	50
89454-70	mm	540	240	70
89454-90	mm	540	240	90
89465-70	mm	650	240	70

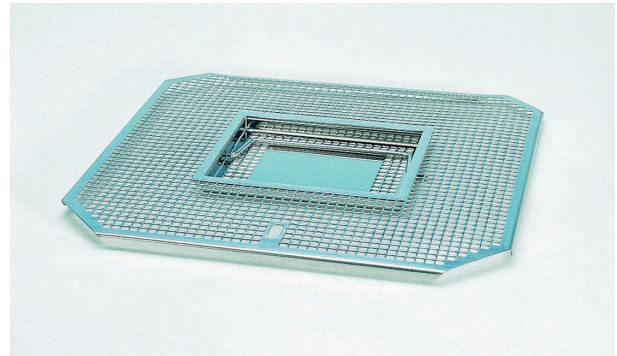

- Edelstahldeckel für Körbe aus Edelstahllochblech
- Stainless steel covers for baskets made of perforated stainless steel sheet
- Tapas para bandejas de acero inoxidable
- Coperchio inox per cestelli in lamiera forata inox


89421-14	mm	210	145
89424-24	mm	240	240
89428-11	mm	280	240
89430-24	mm	300	240
89440-24	mm	380	240
89448-24	mm	480	240
89454-24	mm	540	240
89465-24	mm	650	240

Sterilisierkästen
Sterilizing cases
Cajas para esterilización
Scatole per sterilizzazione



89119-01	220 x 165 x 55 mm
89119-02	300 x 220 x 55 mm
89119-03	400 x 290 x 55 mm

- Deckel und Boden gelocht, mit Textil-Langzeitfiltern für Dampfsterilisation
- Cover and bottom perforated, with long-life textile filters for steam sterilization
- Tapa y cuerpo perforados, con filtro de textil duradero para esterilización a vapor
- Container con coperchio e fondo perforato con filtri tessili a lunga durata sterilizzazione a vapore

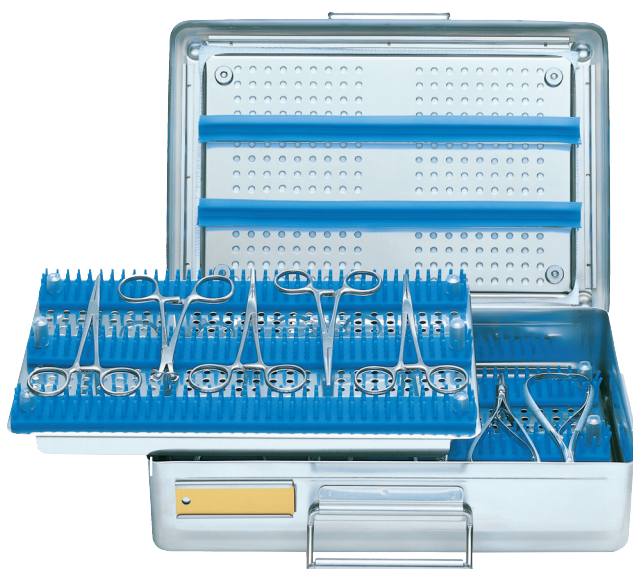


89119-04	220 x 165 x 75 mm
89119-05	300 x 220 x 75 mm
89119-06	400 x 290 x 75 mm

Textil-Langzeitfilter
Long-life textile filter
Filtro de textil duradero
Filtri tessili a lunga durata



89119-10	178 x 115 mm
89119-20	245 x 165 mm
89119-30	358 x 235 mm

Siebkorb für Endoskope
Wire basket for endoscopes
Cesta para endoscopios
Cestelli per endoscopio

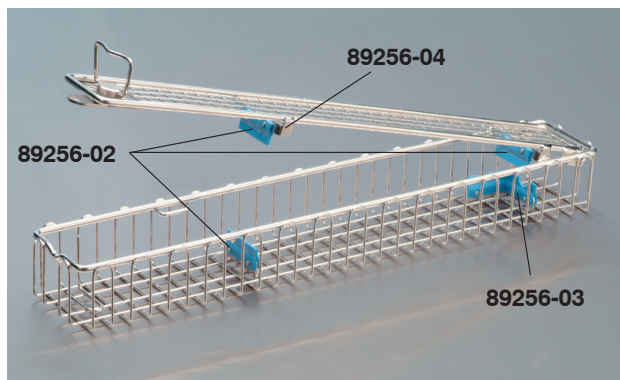

89256-29
 290 x 80 x 52 mm
 für 1 Arthroskop oder 1 Sinuskop
 for 1 arthroscope or 1 sinuscope
 para 1 artroscopio o 1 sinuscopio
 per 1 sinuscopio oppure per artroscopio

89257-29
 290 x 80 x 52 mm
 für 2 Arthroskope oder 2 Sinuskope
 for 2 arthroscopes or 2 sinuscope
 para 2 artroscopios o 2 sinuscopios
 per 2 sinuscopio oppure 2 artroscopio


89256-46
 460 x 80 x 52 mm
 für 1 Laparoskop oder 1 Hysteroskop oder 1 Cystoskop
 for 1 laparoscope or 1 hysteroscope or 1 cystoscope
 para 1 laparoscopia o 1 histeroscopia o 1 cistoscopia
 per 1 isteroscopia oppure 1 cistoscopia

89257-46
 460 x 80 x 52 mm
 für 2 Laparoskope oder 2 Hysteroskope oder 2 Cystoskope
 for 2 laparoscopes or 2 hysteroscopes or 2 cystoscopes
 para 2 laparoscopios o 2 histeroscopios o 2 cistoscopios
 per 2 isteroscopia oppure 2 cistoscopia

89256-67
 670 x 80 x 52 mm
 für 1 Bronchoskop
 for 1 bronchoscope
 para 1 broncoscopio
 per 1 broncoscopio

89256-01 / 89256-02 / 89256-03 / 89256-04
 Ersatzteile
 Spare parts
 Piezas de repuesto
 Pezzi di ricambio

Kunststoff Container für Endoskope
Container for Endoscopes
Contenedor de plastico para endoscopios
Container per alloggi endoscopi rigidi

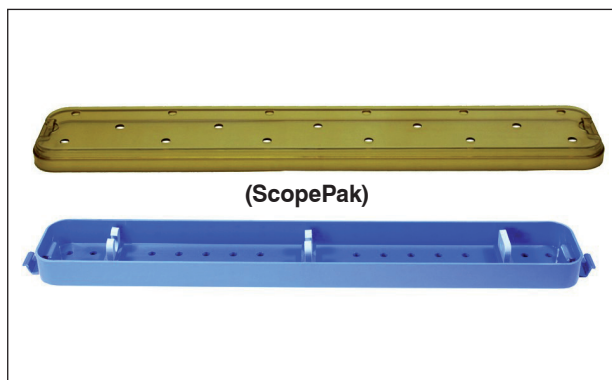

R019-9312
 282 x 76 x 33 mm
 für 1 Arthroskop oder 1 Sinuskop
 for 1 arthroscope or 1 sinuscope
 para 1 artroscopio o 1 sinuscopio
 per 1 sinuscopio opp. per artroscopio


R019-9317
 432 x 76 x 33 mm
 für 1 Hysteroskop oder 1 Cystoskop
 for 1 hysteroscope or 1 cystoscope
 para 1 histeroscopia o 1 cistoscopia
 per 1 isteroscopia opp. 1 cistoscopia

R019-9321
 511 x 76 x 33 mm
 für 1 Laparoskop
 for 1 laparoscope
 para 1 laparoscopia
 per 1 laparoscopia

R019-9326
 666 x 114 x 79 mm
 für 1 Bronchoskop
 for 1 bronchoscope
 para 1 broncoscopio
 per 1 broncoscopio

R019-9331
 813 x 132 x 79 mm
 für 1 extra langes Endoskop
 for 1 extra long endoscope
 para 1 endoscopia extra largo
 per 1 endoscopia extra lungo

Lagerungs- und Sterilisierack
Storage- and sterilization rack
Soporto para almacenaje y esterilizacion
Alloggio instrumenti

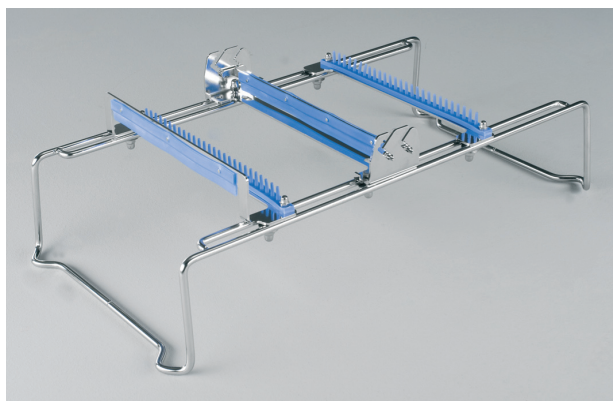


89258-47 für 15 MIC Instrumente
 470 x 250 x 125 mm for 15 MIS instruments
 5 / 10 mm Ø para 15 instr. de laparoscopia
 per 15 instrumenti laparoscopici

89258-25 für Arthroskopie Instrumente
 232 x 210 x 155 mm for arthroscopy instruments
 para instrumentos de artroscopia
 per instrumenti artroscopici

Silikon Profile / silicone bar / barra de silicona / supporti in silicone

Endoskop Halter
Scope Holder
Soporte para endoscopia
Supporti per endoscopici

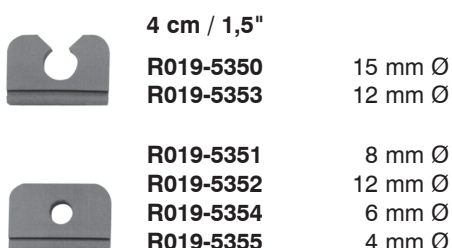

4 cm / 1,5"

R019-5350 15 mm Ø
R019-5353 12 mm Ø

R019-5351 8 mm Ø
R019-5352 12 mm Ø
R019-5354 6 mm Ø
R019-5355 4 mm Ø



7 cm / 2,8"

R019-5340 15 mm/8 mm Ø
R019-5343 15 mm/12 mm Ø



R019-5341 12 mm Ø

Instrumenten Profile
Instrument Bar
Barra para instrumentos
Supporti per alloggio instrumenti
18 cm / 7.0" + 7 cm / 2,8"



R019-5373 lang / long / largo / lungo
R019-5333 kurz / short / corto / corte



R019-5374 lang / long / largo / lungo
R019-5334 kurz / short / corto / corte



R019-5375 lang / long / largo / lungo
R019-5335 kurz / short / corto / corte

Halter
Holder
Soporte
Sostegno



R019-5210

R019-5200

Weitere Kataloge und Prospekte
Other cataloges and prospects

Hauptkatalog Chirurgische Instrumente
General catalog surgical instruments

Endoskopie
Endoscopy

Arthroskopie
Arthroscopy

Titan Instrumente
Titanium Instruments

Urologie
Urology

Neurochirurgie
Neuro Surgery

Plastische Chirurgie
Plastic Surgery

Orthopädie
Orthopedic



INSTRUMENTE GMBH

Gänsäcker 34
P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen
Germany



Fon +49 74 62.94 45-0
Fax +49 74 62.94 45-20
info@Reda-Instrumente.de
www.Reda-Instrumente.de